

懸吊式電動ふるい機


C-81

概要

本機は、木枠ふるいを掛けて比較的大量の骨材を迅速にふるい分けるのに使用します。ふるいに210rpmの週機で水平振動を与えるのと同時にスプリングによる上下運動を与えることにより、大きなふるい分け能力を発揮します。また、脚部には移動用キャスターが装備されています。

仕様

- 1) 水平駆動機構:2段減速プーリー式
- 2) 鉛直駆動機構:スプリングによる両翼懸吊式
2個1組 4箇所
- 3) 水平運動周期:210rpm
- 4) ふるい固定枠:木枠ふるい(40×60×7cm)用
- 5) 電動機 :AC100V 単相0.4kW
- 6) 機体概略寸法:約W1200×D600×H1100mm
- 7) 付属品 :スパナ 2丁
- 8) その他 :ふるいはオプション

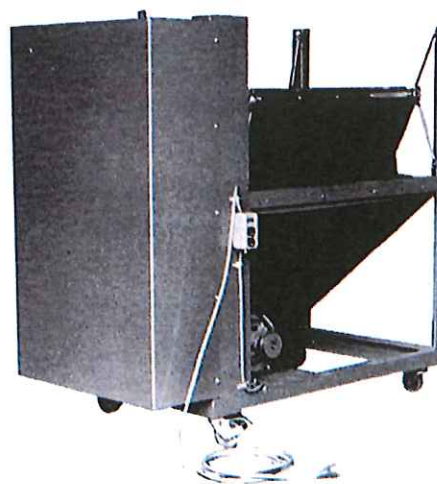

ISO 9001 認証取得
MARUTO CERTIFIED
COMPLIANT

株式会社丸東製作所はお客様に満足していただける
信頼性のある製品を提供するため、品質保証体制の
整備、充実を図っております。



JCSS
JCSS0160

JCSSは計量法第37号正
規を認定する機関です。
(国)丸東製作所は1000以上の計量器具
の生産者である「100000」の認定を
取得しております。
JCSS0160は認定範囲です。



〒135-0021 東京都江東区白河2丁目15番4号
TEL 03-3643-2111 FAX 03-3643-0293
E-mail: maruto@maruto-group.co.jp

試験機器の総合メーカー

〈取扱い営業品目〉 ※ご要望に応じた試作機、テスト機の製作承ります。お気軽にご相談ください。

- 土木・建築用試験機器
- セメント・コンクリート試験機器・土質試験機器
- 試験・研究用切断機・岩石試験機器
- アスファルト試験機器・構造力学実験装置
- 水理実験装置
- 複合材料試験機器
- 自動車関連試験装置
- マルターリング(環状ばね型力計)
- 消費生活用製品安全実験装置
- 測定機器
- 医療関連試験装置