

## TS-46

横送り装置付(ねじ送り機構の精密型)

# 中型精密切断機

### 特 徴

■ 金属材料の場合

ねじ送り機構のためスムーズに切断でき、バリを切断の縁部に生じさせることが無く、焼けがない鏡のような切断面が得られる


■ 硬脆材料の場合

ねじ送り機構のため切断速度を調節でき、切断面にカケを生じさせず、極めてきれいな切断面が得られる

### 仕 様

① 切断可能寸法	高さ60(φ60)×幅95×長さ200mm
② 電動機	単相100V、0.3kW
③ 機体寸法	幅550×奥行720×高さ410mm
④ 機体質量	約53kg

別途注文品/ブレード(φ150mm、φ200mm)

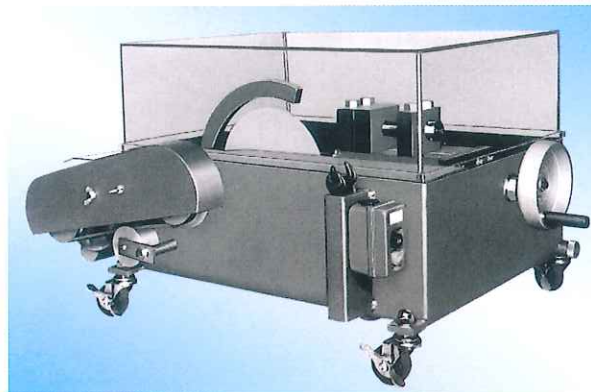

## AC-200

無段変速式自動送り装置付

# 自動精密切断機

### 特 徴

■ 万力に横送り装置が付いているため、切断長さの調節が可能(スライス切断)

■ 回転速度はプーリーにて二段切換え式

### 仕 様

① 切断可能寸法	高さ60(φ60)×幅95×長さ200mm
② 自動送り装置(手動兼用)	単相100V、25W 送り速度: 1~15mm/min(無段変速式)
③ 主軸回転数	1440/2880rpm(50Hz) 1730/3270rpm(60Hz)
④ 電動機	単相100V、0.3kW
⑤ 機体寸法	幅600×奥行800×高さ420mm
⑥ 機体質量	約58kg

別途注文品/ブレード(φ150mm、φ200mm)

